

Limfodrenāžas zābaki BG-S-1981

Lietošanas instrukcija

Paredzētā izmantošana:

Limfodrenāžas masāža kājām.

Tehniskie parametri:

Jaudas padeve: AC 230 V / DC 9 V / 200 mA (vai 4 gabali AA 1.5V - nav iekļautas).

Patēriņš: 1.8 W

Spiediena diapazons: 10-40 kPa

Kontrindikācijas (Lietošanas ierobežojumi):

A) Absolūti nedrīkst lietot:

- Zīdīšanas laikā;
- Grūtniecība (grūtniecības laikā līdz 3 mēnešiem).

B) Ar ārsta konsultāciju (Pēc ārsta ieskatiem)

Brīdinājums:

Ikreiz, kad jūs izmantojat elektroiekārtas, ievērojiet pamata drošības noteikumus:

- Sargājiet iekārtu no ūdens, elektriskās detaļas var būt aktīvas arī pēc to atslēgšanas no strāvas avota.
- Vienmēr pēc ierīces izmantošanas atvienojiet adapteri. Ja ierīce iekrīt ūdenī, nekavējoties izslēdziet to.
- Nekad nenovietojiet /neglabājiet ierīci vietās, kur tā var nonākt saskarē ar ūdeni vai citu šķidrumu, piemēram, vannā, izlietnē, tualetē u.tml.
- Lai samazinātu uguns, elektrošoka vai cita veida traumu risku neatstājiet iekārtu bez uzraudzības, ja ierīce ir pievienota elektriskajam tīklam un/vai ieslēgta.
- Lietojot ierīci neizmantojiet piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs.
- Vienmēr ievērojiet visus norādījumus, kas aprakstīti šajā instrukcijā.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

Nelietojiet ierīci šādos gadījumos:


- Kad mazgājaties vai esot dušā
- Ja elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti
- Ja ierīce nedarbojas pēc kritiena vai trieciena.
- Pēc ierīces samirkšanas.
- Pēc citiem bojājumiem
- Ja esat miegains vai stipri noguris.

Šis produkts nav medicīnas ierīce! Iekārta ir jāizmanto tikai mājās apstākļos. Šis produkts negarantē jebkāda veida veselības efektus. Mēs iesakām pirms ierīces izmantošanas konsultēties ar ārstu.

Kā šī ierīce darbojas?

Zābaki ar gaisa spiedienu viegli masē kājas. Vienmēr pirms izmantojiet ierīci pārbaudiet vadības bloku. Ierīcei nepieciešams četras 1.5V AA tipa baterijas (nelietot vecas/savstarpēji dažādas baterijas). Ievērojiet pareizu bateriju polaritāti.

1. Nospiediet "POWER" pogu uz vadības bloka, lai ieslēgtu ierīci, pēc tam ieslēdzas LED indikators. Ja vēlreiz nospiedīsiet "POWER" pogu, ierīce izslēgsies.
2. Ieslēdzot zābakus automātiski ieslēdzas "6" pozīcija.
3. Regulējiet masāžas kompresiju nospiežot pogas "UP" vai "DOWN".

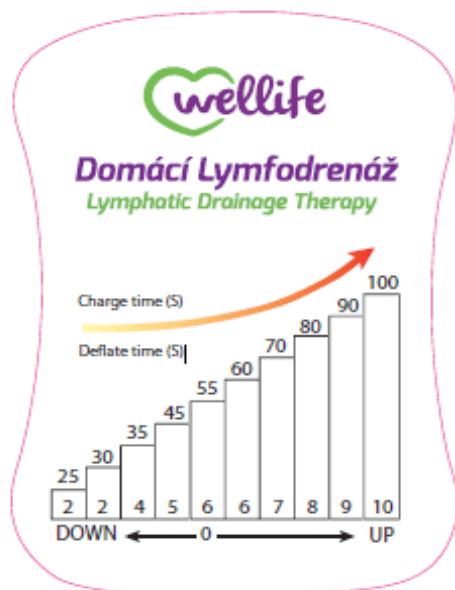

Charge time (S):

= kompresija (sekundes)

Deflate time(S) :

= deflācija (sekundēs)

Piem.:

Līmenis "0" = 54s Kompresija / 6s deflācija.

UP → ilguma iestatījums masāžai,
izmantojiet UP pogu.

4. Masāžas zābakus kājām (C) un masāžas manšetes augšstilbiem (B) var izmantot kopā vai atsevišķi.
5. Ieteicamais masāžas laiks 5 min., pēc tam ierīce jāizslēdz uz 3-5min. Pēc 3-5min. varat atkārtot masāžu vēlreiz.
6. Pēc masāžas, no ierīces atvienojiet caurules, deflācijas veikšanai, lai jūs varētu ērti noņemt zābakus un manšetes.

Svarīgi!

Nemazgājiet zābakus vai manšetes veļas mašīnā. Nemazgājiet ar ķīmikālijām vai balinātājiem. Tīriet ierīci noslaukot to ar mitru drānu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Uzmanību!

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.

Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5.

apakšpunkts nosaka ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem nr. 689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnās **ierīce**.

Importēts no Čehijas Republikas.