


Medikamentu organizators

Taimera uzstādīšana:

Pārliecinieties, ka ierīce ir gaidīšanas režīmā – spiediet pogu SART/STOP, līdz punkti starp cipariem pārstāj mirgot. Uzstādiert taimeri ar pogām MIN un HR uz nepieciešamu laika intervālu. Spiediet pogu HR (00:00) un pogu MIN (00:00) līdz ekrānā uzrādās nepieciešamais stundu un minūšu skaits līdz paredzētajam medikamentu lietošanas brīdim. Uzspiediet pogu START/STOP. Taimeris uzsāks laika atskaiti (skaitot laiku uz atpakaļu līdz 00:00). Kad taimeris sasniegs 00:00 – ierīce sāks atskaņot signālu. Lai apturētu signālu, nospiediet pogu START/STOP. Nospiežot pogu START/STOP kamēr skan signāls, taimeris tiks uzstādīts uz pēdējo iestatīto laiku. Nospiežot pogu HR kamēr skan signāls, signāls tiks apturēts un uzrādīs noklusējuma laika vērtību – 00:00. Lai restartētu taimeri un uzstādītu laiku 00:00, iespējams nospiegt pogas HR un MIN vienlaicīgi.

Detāļu apraksts:

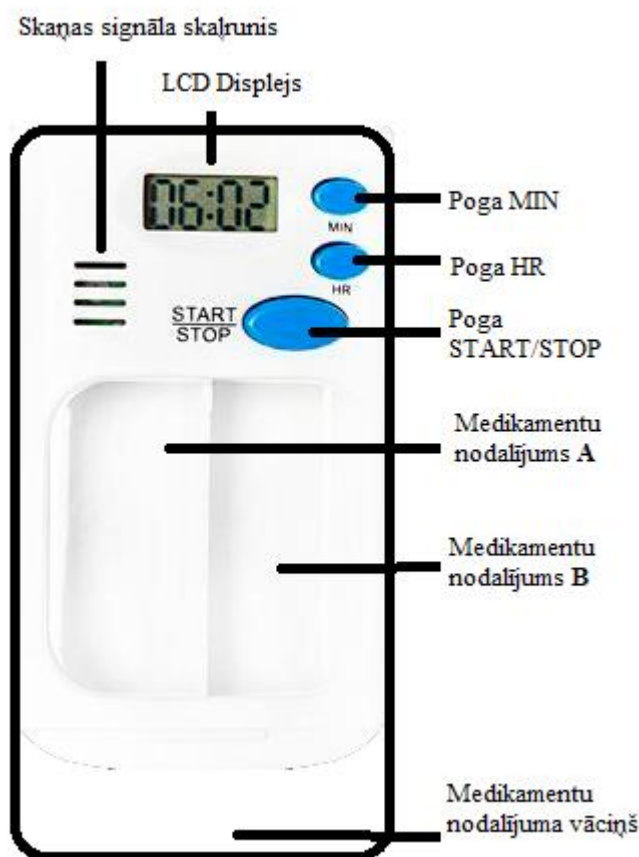

Bateriju maiņa:

Atskrūvējiet ierīces zilo bateriju pārsegu. Nomainiet bateriju, ievērojot korektu bateriju polaritāti.

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.689 (Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība), prece netiek klasificēta kā medicīnas ierīce.

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.

Организатор медикаментов Инструкция по пользованию

Установка таймера:

Убедитесь, что прибор находится в режиме ожидания – нажимайте кнопку SART/STOP до тех пор, пока точки между цифрами не перестанут мигать. Установите таймер кнопками MIN и HR на необходимый временной интервал. Нажимайте кнопку HR (00:00) и кнопку MIN (00:00) до тех пор, пока на экране не появится необходимое количество часов и минут до запланированного времени введения препарата. Нажмите кнопку START/STOP. Таймер начнет обратный отсчет (до 00:00). Когда таймер дойдет до 00:00 – устройство начнет воспроизводить сигнал. Чтобы остановить сигнал, нажмите кнопку START/STOP. Нажатие кнопки START/STOP во время звукового сигнала сбросит таймер на последнее установленное время. Нажатие кнопки HR во время звучания будильника выключит будильник и отобразит значение времени по умолчанию 00:00. Чтобы перезапустить таймер и установить время на 00:00, можно одновременно нажать кнопки HR и MIN.

Описание деталей



Замена батарей:

Отвинтите синюю крышку аккумуляторного отсека устройства. Замените батарею, соблюдая правильную полярность батарей.

Согласно постановлению Кабинета Министров NR 689 (Регистрация, оценка соответствия, распространение, эксплуатация и технический надзор за изделиями медицинского назначения) изделие не относится к изделиям медицинского назначения.